

## Ćw.5. Sprawdzanie stężenia roztworów glukozy

### Wstęp

Ćwiczenie przedstawia metodę kontroli stężenia roztworów glukozy stosowanych w żywieniu pozajelitowym poprzez pomiar współczynnika załamania przy użyciu czujników światłowodowych. Zaproponowano sposób pomiaru czujnikiem opartym na wykorzystaniu interferometru Fabry-Pérot.

**zagadnienia do samodzielnego opracowania:** prawo odbicia i załamania; transmisja światła – przebyta droga; stężenia roztworów stosowane w chemii i w medycynie; apertura numeryczna; światłowodowe czujniki załamania budowa, zasada działania, zastosowania

### Zasada działania czujnika światłowodowego

FRI jest światłowodowym czujnikiem współczynnika załamania, idealnym do pomiarów płynów w przemyśle chemicznym i spożywczym. Najczęściej stosowany do pomiaru stężenia oleju.

FRI jest miniaturowym czujnikiem, który zapewnia pomiar ciągły refrakcji in-situ, umożliwia ciągłe monitorowanie dowolnego procesu, przemysłowego, chemicznego inżynierii żywności, eliminując w ten sposób ręczne pobieranie próbek.

Czujniki te zaprojektowano tak, aby wytrzymać zmienną temperaturę, pole elektromagnetyczne oraz wibracje. Przykładowo inżynierowie pracujący nad rozwojem systemów chłodzenia stosują czujniki w projektowaniu systemów chłodzenia.

W dowolnym miejscu, w którym stosowane są płyny chemiczne, można teraz ulepszyć proces i technologię produktu poprzez monitorowanie konkretnych właściwości w czasie.

Zastosowanie czujnika refrakcji FRI pozwala na pełną analizę współczynników załamania światła w najbardziej wymagających środowiskach.

Zasada działania czujnika oparta jest na wariancie napełnionej wnęki interferometru Fabrego-Perota cieczą. Długość optyczna zmienia się w bezpośrednim stosunku do współczynnika załamania światła próbki cieczy. Pomiar współczynnika załamania światła dokonywany jest przez pomiar długości optycznej wnęki Fabrego-Perota za pomocą interferometru światła białego.

Zasada działania czujnika opiera się na interferencji fali świetlnych, które przetwarzane są na informację cyfrową -

Pomiar czujnikiem światłowodowym opiera się na wykorzystaniu interferometru Fabry-Pérot (IFP). Obraz interferencyjny uzyskiwany jest dzięki wnęcie rezonansowej. W płaskim

IFP równoległa wiązka światła może odbijać się wielokrotnie od płaskich zwierciadeł ustawionych równolegle lub nie odbijać się wcale. Wszystkie promienie (odbijające się i nie odbijające się) interferują ze sobą dając wkład do wypadkowego natężenia światła przechodzącego przez IFP. Natężenia światła na wyjściu określa wzór:


$$I = \frac{I_0}{1 + F \sin^2 \Phi} \quad (1)$$

gdzie  $\Phi$  jest opóźnieniem fazy, powstałym przy jednokrotnym przejściu wiązki przez wnękę rezonansową, natomiast wielkość

$$F = \frac{4R}{(1-R)^2} \quad (2)$$

nazywana jest współczynnikiem smukłości prążków interferencyjnych,  $R$  oznacza natężeniowy współczynnik odbicia luster.


Zasada działania IFP przedstawiona jest na rysunku 1. Ciągłe szerokopasmowe źródło światła jest wprowadzane do czujnika optycznego, na którego zakończeniu zlokalizowany jest sensor F-P. Ten czuły element składa się z dwóch równoległych półprzepuszczalnych lusterek oddzielonych wnęką. Światło przechodzące przez pierwsze lustro jest po części odbijane z powrotem a część przedostaje się naprzód. Powtarza się to wiele razy pomiędzy dwoma równoległymi płaszczyznami tworzącymi interferometr F-P.

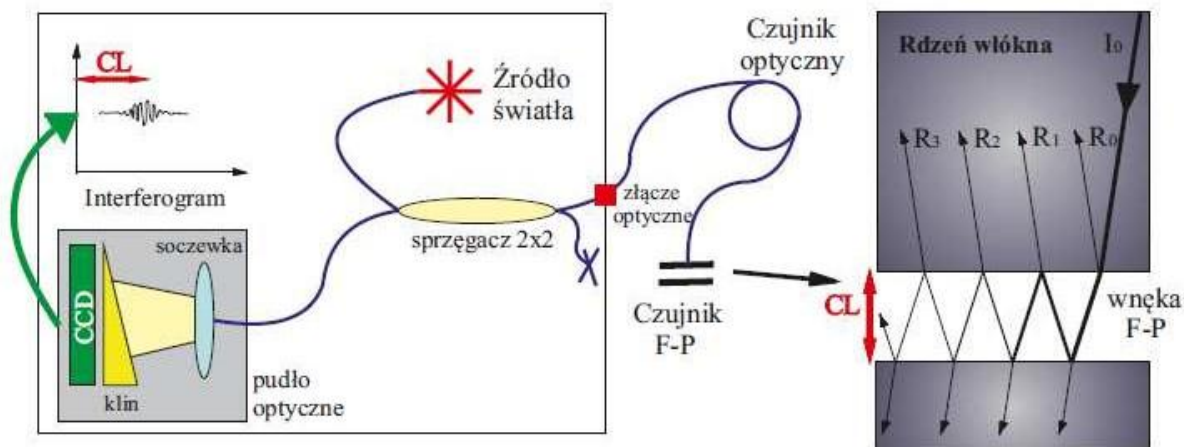

**Rysunek 1.** Schematyczny opis bezwzględnego sygnału pomiarowego F-P opartego na interferencji światła białego (po lewej) i struktura interferometru pomiarowego F-P pokazująca bieg promieni uzyskanych przez rozchodzenie się wiązki światła w rdzeniu włókna optycznego (po prawej).

Sonda FRI-BA jest solidnym, światłowodowym czujnikiem współczynnika załamania. Parametry geometryczne czujnika przedstawia rysunek 2:

### FRI-BA Model

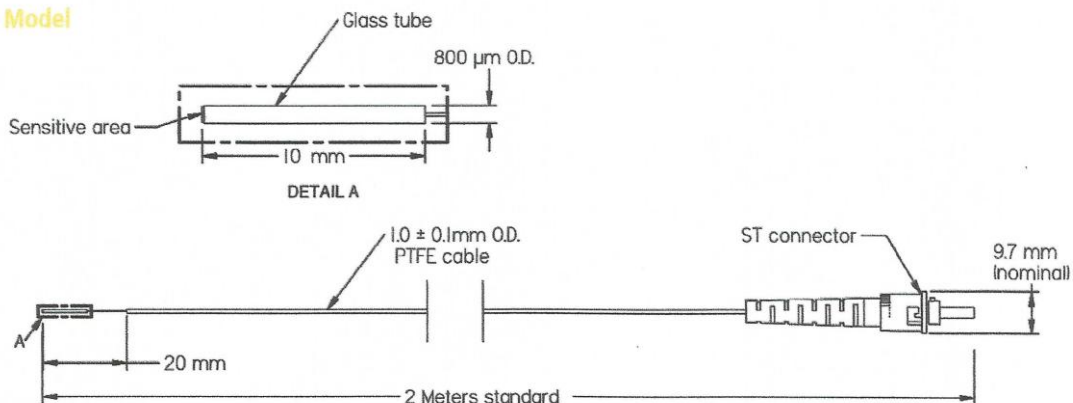

**Rysunek 2.** Konstrukcja sondy pomiarowej FRI-BA.

Źródło: [www.fiso.com](http://www.fiso.com)

Zakres pomiarowy współczynnika załamania czujnika FRI-BA wynosi od 1,0000 do 1,7000, rozdzielczość 0,0001RI, a dokładność pomiaru  $\pm 0,0005$ RI. Temperatura robocza 0-100 °C, Typ złącza ST.

### Przebieg ćwiczenia

1. Ustawić czujnik współczynnika załamania w odpowiednich pojemnikach roztworu glukozy o stężeniu opisanym jako C=0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%.
2. Odczytać wartość współczynnika załamania n.
3. Wykonać kilka serii pomiarów.
4. Sporządzić roztwór glukozy o nieznanym stężeniu i dokonać pomiaru tego stężenia mierząc jego współczynnik załamania.
5. Narysować wykres  $n=f(C)$  oraz metodą najmniejszych kwadratów określić współczynniki kierunkowe prostej, współczynnik korelacji oraz narysować (przy pomocy odpowiedniego programu komputerowego) linie dla poziomu ufności wynoszącego 99%. Jeżeli narysowanie linii dla tego poziomu ufności się nie uda to należy sporządzić statystykę odległości (w poziomie) punktów wzorcujących od dopasowanej prostej i wyznaczyć niepewności odczytu stężenia z tej prostej, należy pamiętać o podaniu w sprawozdaniu danych statystyki.
6. Na podstawie wykresu i współczynników dopasowania podać wynik pomiaru roztworu o nieznanym stężeniu (wraz z niepewnością rozszerzoną).